


Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı

Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı'nızı hiçbir elektronik enerji aksamına ihtiyaç duymadan; akıllı telefonunuz, tabletiniz veya USB girişe sahip herhangi bir cihaza takıldığı anda beyazlatma işlemi için çalışır duruma gelecektir. Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı, Diş Hekimleri'nin kullandığı beyazlatma sistemi ile aynı teknolojiyi kullanmaktadır ve 16'lı Mavi LED ışıklı 3D Beyazlık Teknolojisi ile en etkin beyazlığa ulaşmanızı sağlar.


Siz ve sevdikleriniz güvenle Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı'nı kullanabilir, dişlerinizin doğal beyazlığına kavuşabilirsiniz.

Kullanma Talimatı:

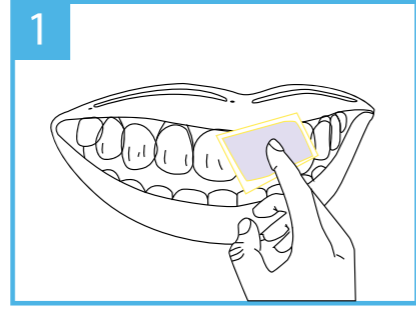

Dişlerinizi kurulayınız.

1-Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı'nızı kullanmadan önce dişleriniz temiz ve kuru olmalıdır.

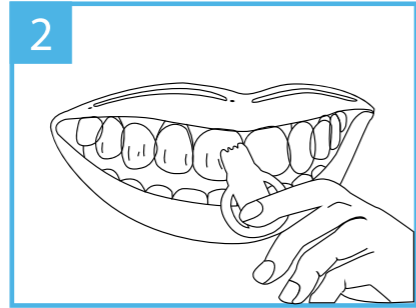


Diş yüzeyine jeli uygulayınız.

2- Uygulama öncesi Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı'nızın daha önce kullanmış iseniz, mutlaka ağızlık kısmının sıcak su ile yıkanıp kurulduğundan emin olun. Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı'nız beraberinde 2 adet Diş Beyazlatma Jeli ile birlikte gelmiştir. Diş Beyazlatma Jeli'ni gövdesinden sıkarak fırça yardımı ile dişlerinize uygulayınız.



Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı'nızı ağızınıza takarak 10 dakika uygulayınız.

3- Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı'nızı iPhone,Android veya USB kablo ucundan uygun olanı akıllı cihazınıza takınız ve cihazın ağızlığını takarak 10 dakika süresince ağızınızdan çıkartmayınız.

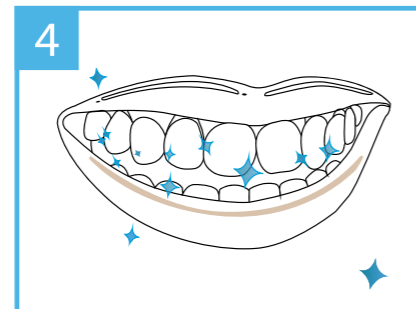

Dişlerinizi yıkayınız.

4- İşlem tamamlandığında ağızlığınızı çıkartıp, ağızınızı su ile çalkalayarak dişlerinizi yıkayınız.

Bu işlemi 10 gün boyunca almak istediğiniz sonuca göre günde 1 veya 2 kez uygulayınız. Her uygulama öncesinde Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı'nızı sıcak su ile durulayarak temiz olduğuna emin olunuz.